

Ванна Для Сухого Гидромассажа

AQUATIZER QZ-240

Технические характеристики

Модель	Aquatizer QZ-240SG
Классификация защиты от поражения электрическим током	Класс I тип В
Питание от сети	Однофазное 220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	4500 ВА
Интенсивность массажа	6 уровней
Процедурное время	от 1 до 99 минут
Температура предварительного нагрева	от 25 до 40 °С
Другие функции	Переключение гидрофорсунок, автоматическое определение роста, фиксация ног, таймер предварительного нагрева, установка музыкальной темы во время процедуры, автоматическое удаление воздуха, ограничение работы при высоких температурах.


Условия установки

Устройство электроснабжения	Требуется установка устройства защиты от тока утечки на объекте
Нагрузка на пол	Не менее 3,5 кПа (350 кгс/м ²)

Внешние характеристики


Габариты	2290 (Д) x 820 (Ш) x 1075 (В) мм Высота кровати: 500 мм
Вес	230 кг (с затемненным козырьком 238 кг) 458 кг (полная ванна со светозащитным козырьком)
Вместимость резервуара ванны	~ 220 л

Внешние габариты, мм

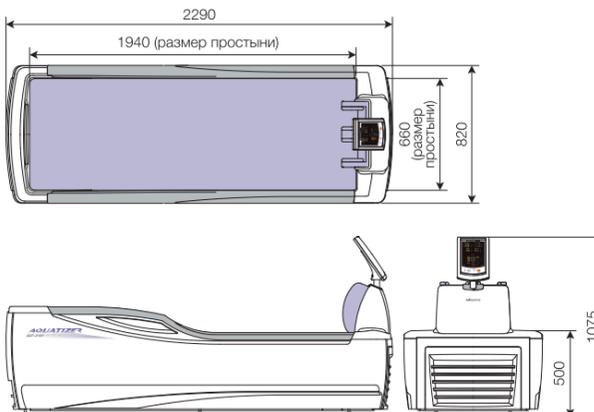

Модель с затемненным козырьком для повышенного комфорта (Опционально)

В линейке оборудования Минато доступна модель с затемненным козырьком. Изолируя клиента от окружающей среды, эта модель позволяет повысить комфортность процедуры и дает возможность пациенту полностью расслабиться.

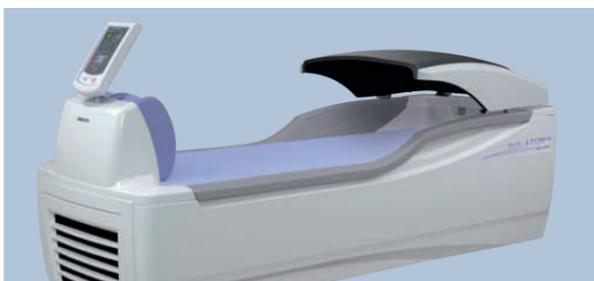

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем приступить к работе с оборудованием.
- Оборудование требует регулярной проверки перед началом использования.
- Оборудование требует проведения электромонтажных работ. Если вы не можете выполнить технические задачи, свяжитесь с Вашим местным торговым представителем или нашим офисом продаж. Неправильная установка оборудования может стать причиной электротравм или пожаров.

- Информация об оборудовании может быть изменена без предварительного уведомления.
- Цвет оборудования может отличаться от представленного на фото в каталоге.

• Доступные опции могут быть изменены без предварительного уведомления

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК В РОССИИ:



ФУДЖИТОРА

Москва, Скаковая 36, офис 200

8 (800) 333-05-24

web@fujitora.com

www.fujitora.com

Rehabilitation & Wellness
MINATO

Japan
Good Design
Award



Ванна Для Сухого Гидромассажа

AQUATIZER QZ-240



MINATO MEDICAL SCIENCE CO., LTD.


Фантастический комфорт

Ванна для сухого гидромассажа нового поколения в ультрасовременном стиле

В модельной линейке "Aquatizer QZ" японского концерна Минато представлены последние достижения в области применения сухого гидромассажа. Aquatizer QZ-240 выполнена в футуристическом дизайне и оснащена суперсовременными опциями, такими как 4 подвижных гидрофорсунки, мягкие фиксирующие подушки для ног и автоматический датчик измерения роста. Уникальная концепция дизайна ванны обеспечивает комфорт пациента и удобство в использовании.

Четыре подвижных гидрофорсунки расширяют возможности лечения


Использование четырех гидрофорсунок позволяет проводить массаж нескольких зон одновременно, либо сфокусироваться на массаже определенной части тела.

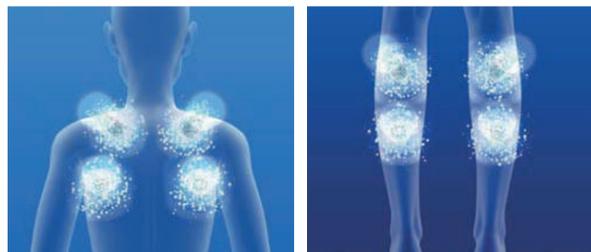

Широкий спектр массажных режимов удовлетворяет потребности любого Пациента

В дополнение к 7 стандартным режимам массажа, система дает возможность выбрать скорость проведения терапии - "стандартный режим" или "медленный режим". Программа представляет 6 различных уровней интенсивности массажного воздействия.

Схема движения гидрофорсунок

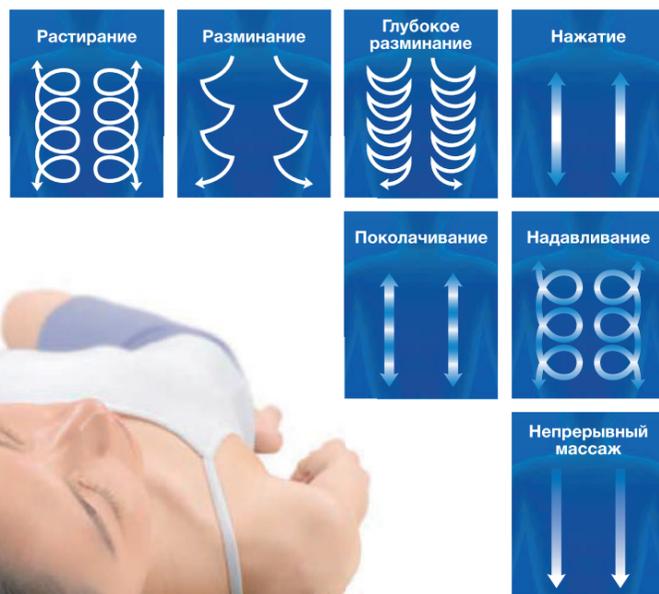

Удобство и ультрасовременный дизайн позволяют легко ложиться и вставать для проведения процедуры

Несмотря на компактные размеры, 229 x 82 см, ванна имеет широкое ложе. Небольшая высота ванны в 50 см позволяет легко ложиться и вставать для проведения процедуры.





Воздушные подушки мягко фиксируют положение ног

Поддерживая оптимальное положение ног, воздушные подушки удерживают ступни ног вместе, что позволяет улучшить массажную стимуляцию нижней части тела. Кроме того, фиксация ног помогает удерживать тело пациента в оптимальном для проведения процедуры положении.



Автоматический сенсорный датчик для определения положения головы

В положении "лежа" сенсорный датчик определяет положение головы, измеряет рост пациента и определяет зоны массажного воздействия. В отличие от предыдущих моделей, больше нет необходимости измерения роста каждого пациента медицинским персоналом.

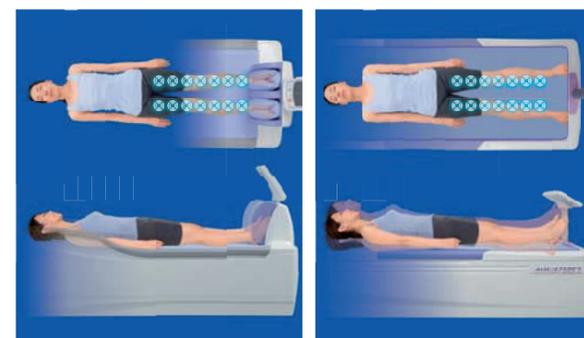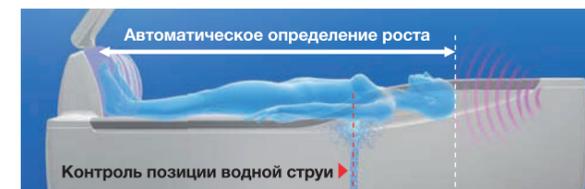

Aquatizer QZ-240SG
При фиксированной позиции ног, стимулирующая водная струя направляется точно вдоль задней поверхности бедра и голени. Фиксация ног помогает удерживать тело пациента в оптимальном положении.

Модель Предыдущего Поколения
Ступни ног не удерживаются вместе и выходят за пределы массажной зоны. Тело пациента не фиксируется в правильном положении.